

 PT. PRESISI KALIBRASI MEDIKA	Formulir	Kode Dokumen : F.MT.LK.01.7
	Lembar Kerja Kalibrasi Medical Freezer	Edisi / Revisi : 01 / 02
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 1 dari 3

No. sertifikat :

Nama Alat :	No.alat :
Merk :	Pemilik :
Model/tipe :	Ruangan :
No.seri :	Tgl. Terima :
Kapasitas :	Tgl. Kalibrasi :
Resolusi :	

A. Daftar Alat yang Digunakan

No	Nama Alat	Merk	Type/Model	No. Seri
1	Thermometer 12 channel			
2	Electrical Safety Analyzer			
3	Thermohygrometer			

B. Pengukuran Kondisi Lingkungan

Kondisi Ruangan	Terukur		Toleransi
Suhu (°C)	Awal : °C	Akhir : °C	25 ± 6 °C, (ΔT) 3°C
Kelembaban / RH (%)	Awal : %	Akhir : %	55 % ± 20 % RH, Δ%RH 10%RH
Tegangan Input	L-N : Vac		220 ± 10% Volt
	L-G : Vac		
	N-G : Vac		

C. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No.	Parameter	Batas Pemeriksaan	Keterangan
1	Badan / Permukaan	periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya.	☐ Baik ☐ Tidak Baik
2	Tusuk kontak alat	Periksa apakah ada gangguan pada tusuk kontak (AC power). Gerak-gerakan tusuk kontak untuk memastikan kemaanannya. Goyang-goyangkan tusuk kontak untuk memastikan tidak ada baut atau mur yang longgar. Jika ada, buka mur dan ganti dan perbaiki bila perlu.	☐ Baik ☐ Tidak Baik
3	Kabel catu utama (Line cord)	Periksa kabel, apakah terlihat ada kerusakan. Jika ada pindahkan atau tukar kabel yang rusak. Jika kerusakan disekitar ujung kabel singkirkan bagian yang rusak dan ganti dengan yang baru. Pastikan kabel power yang baru ataupun kotak kontak yang baru mempunyai polaritas yang sama dengan yang lama. Periksa juga fungsi kabel chargernya waktu dipergunakan untuk mengisi ulang.	☐ Baik ☐ Tidak Baik
4	Tombol, saklar dan kontrol	Sebelum mempergunakan/ mengubah-ubah tombol kontrol, periksa posisinya, jika terlihat tidak berada pada posisinya (periksa dengan menggunakan mode pemeriksaan standar). Bandingkan dengan posisi kontrol. Ingat pengaturan tersebut dan jangan lupa untuk mengembalikan pada setting awal jika sudah selesai menggunakan.	☐ Baik ☐ Tidak Baik

 PT. PRESISI KALIBRASI MEDIKA	Formulir	Kode Dokumen : F.MT.LK.01.7
	Lembar Kerja Kalibrasi Medical Freezer	Edisi / Revisi : 01 / 02
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 2 dari 3

5	Tampilan dan indikator	selama pengecekan fungsi, pastikan tampilan indicator dan tampilan berfungsi seluruhnya, yakinkan bahwa tampilan digital berfungsi	☐ Baik ☐ Tidak Baik
---	------------------------	--	--

D. Pengukuran Keselamatan Listrik

Tipe bagian yang diaplikasikan	☐ B	☐ BF	☐ CF
Kelas Proteksi	☐ I	☐ II	☐ Baterai
Hubungan Utama	☐ DPS	☐ NPS	☐ PIE
Catatan:	PIE : Peralatan yang diinstalasi permanen NPS : Kabel catu daya yang tidak dapat dilepas DPS : Kabel catu daya yang dapat dilepas		

No.	Parameter	Terukur	Ambang Batas
1	Resistansi Pembumian Protektif	Ω	$\leq 0,3 \Omega$
2	Resistansi Isolasi	$M\Omega$	$> 2 M\Omega$
3	Arus Bocor Peralatan	μA	$\leq 500 \mu A$
4	Arus bocor bagian yang diaplikasikan *	μA	$\leq 500 \mu A$

*) Tidak dilakukan jika catu daya menggunakan baterai

*) Diuji Ketika uut berhubungan langsung ke pasien

E. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

Setting suhu $-5^{\circ}C$ sampai $-150^{\circ}C$

Data ke ($^{\circ}C$)	Pembacaan indikator UUT ($^{\circ}C$)	Hasil pengukuran ($^{\circ}C$)									Toleransi
		T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	
1		Note : untuk pembacaan standar sudah terekam pada thermometer 12 channel, hasilnya akan dilampirkan pada dibelakang LK									Pembacaan suhu $\pm 1,5^{\circ}C$ dari pengaturan
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											

	Formulir	Kode Dokumen : F.MT.LK.01.7
	Lembar Kerja Kalibrasi Medical Freezer	Edisi / Revisi : 01 / 02
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 3 dari 3

19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
Setting UUT			

F. Telaah Teknis


No	Parameter	Hasil Pengamatan	
		Baik	Tidak Baik
1	Kondisi Alat 10		
2	Keselamatan Listrik 40		
3	Kinerja Peralatan 50		

G. Kesimpulan Telaah Teknis Kalibrasi

Baik dan laik untuk digunakan ☐

Tidak baik dan tidak laik untuk digunakan ☐

Petugas Kalibrasi :	Entri data oleh :
---------------------	-------------------

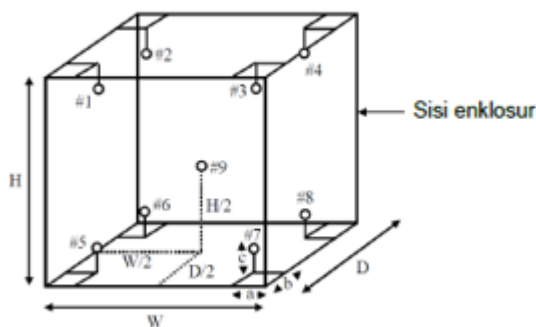

Penempatan Sensor