

 PT. PRESISI KALIBRASI MEDIKA	Formulir	Kode Dokumen : F.MT.LK.01.39AB
	Lembar Kerja Kalibrasi Timbangan Bayi	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 1 dari 3

No. sertifikat :

Nama Alat :	No.alat :
Merk :	Pemilik :
Model/tipe :	Ruangan :
No.seri :	Tgl. Terima :
Kapasitas :	Tgl. Kalibrasi :
Resolusi :	

A. Daftar Alat yang Digunakan

No	Nama Alat	Kelas Anak Timbangan	Merk	Type/Model	No. Seri
1	Anak Timbangan				
2	Anak Timbangan				
3	Anak Timbangan				
4	Anak Timbangan				
5	Anak Timbangan				
6	Anak Timbangan				
7	Thermohygrometer	-			

B. Pengukuran Kondisi Lingkungan

Kondisi Ruangan	Terukur		Toleransi
Suhu (°C)	Awal : °C	Akhir : °C	17 °C < t < 27 °C
Kelembaban / RH (%)	Awal : %	Akhir : %	40% < RH < 80%

C. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No.	Parameter	Batas Pemeriksaan	Keterangan
1	Badan / Permukaan	Periksa bagian luar dan kondisi kebersihan fisik secara menyeluruh. Pastikan bersih, terpasangn ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya.	☐ Baik ☐ Tidak Baik
2	Jarum/display timbangan.	Periksa apakah ada gangguan pada jarum/display, pastikan masih berfungsi dengan baik dan pastikan dapat menunjukkan angka nol bila tidak diberi beban.	☐ Baik ☐ Tidak Baik
3	Pegas/load cell	periksa apakah terlihat ada kerusakan dsn pastikan berfungsi dengan baik, dan dapat menunjukkan angka nol bila diatur/ditekan.	☐ Baik ☐ Tidak Baik
4	Selector/ Tombol Zero	Periksa apakah dapat berfungsi dengan baik, dan dapat menunjukkan angka nol bila diatur/ditekan.	☐ Baik ☐ Tidak Baik

 PT. PRESISI KALIBRASI MEDIKA	Formulir	Kode Dokumen : F.MT.LK.01.39AB
	Lembar Kerja Kalibrasi Timbangan Bayi	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 2 dari 3

D. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

Kalibrasi Daya Ulang Pembacaan

Beban setengah kapasitas

Gram

No	Timbangan Tanpa Beban zi (Gram)	Timbangan Dengan Beban Mi (Gram)	Toleransi (Gram)
1			10x Resolusi Timbangan
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			


Penyimpangan Dari Nilai Nominal


No	Titik Ukur (Gram)	z1 (Gram)	mi (Gram)	z2 (Gram)	Toleransi (Gram)
1					10x Resolusi Timbangan
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Posisi :

☐

☐

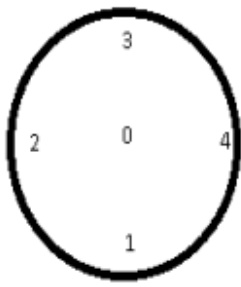

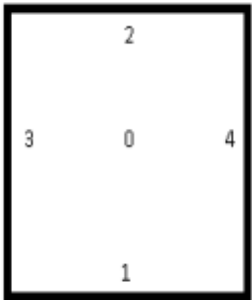

 PT. PRESISI KALIBRASI MEDIKA	Formulir	Kode Dokumen : F.MT.LK.01.39AB
	Lembar Kerja Kalibrasi Timbangan Bayi	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 3 dari 3

E. Telaah Teknis

No	Parameter	Hasil Pengamatan	
		Baik	Tidak Baik
1	Kondisi Alat (20)		
2	Kinerja Peralatan (80)		

F. Kesimpulan Telaah Teknis Kalibrasi

Baik dan laik untuk digunakan ☐

Tidak baik dan tidak laik untuk digunakan ☐

Petugas Kalibrasi :	Entri data oleh :